

(EN) Mounting instruction

(DK) Monteringsvejledning

(DE) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Montage-voorschrift


(SV) Monteringsanvisning

(NO) Monteringsveiledning

(ES) Instrucciones de montaje

Subject to alteration without further notice. Ret til ændringer forbeholdes. · Recht auf Änderungen sind vorbehalten. · Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications sans préavis. · Wijzigingen voorbehouden. · Rätten till ändringar förbehålles. · Vi forbeholder oss rett til endringer. · Salvo variaciones.



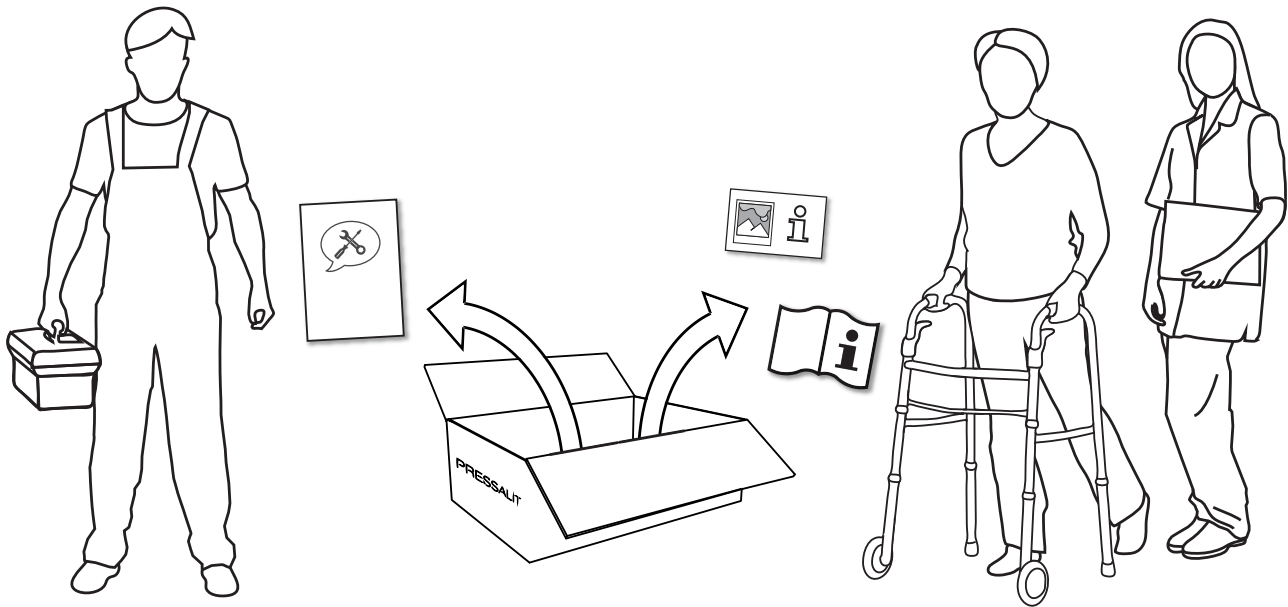

- (EN) Operation and maintenance manual (OMM) for this product is enclosed in the box. Please hand over to the user. It can also be downloaded at www.pressalit.com.
- (DK) Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen til dette produkt er vedlagt i emballagen. Giv den videre til brugeren. Den kan også downloades på www.pressalit.com.
- (DE) Eine Gebrauchsanweisung mit Informationen zu Bedienung und Wartung ist im Lieferumfang enthalten. Händigen Sie diese dem Benutzer aus. Diese kann auch von der Website www.pressalit.com heruntergeladen werden.
- (FR) Le manuel d'utilisation et de maintenance de ce produit est inclus dans l'emballage. Veuillez le remettre à l'utilisateur. Il est également téléchargeable sur le site www.pressalit.com.
- (NL) De gebruiks- en onderhoudshandleiding voor dit product wordt in de doos meegeleverd. U wordt verzocht dit aan de gebruiker te overhandigen. Deze kan ook op www.pressalitcare.com worden gedownload.
- (SV) Användar- och underhållsmanualen för denna produkt medföljer i förpackningen. Ge den till användaren. Den går även att ladda ned på www.pressalit.com.
- (NO) Bruks- og vedlikeholdsanvisning for dette produktet følger med i boksen. Gi den til brukeren. Den kan også lastes ned fra www.pressalit.com.
- (ES) El manual de uso y mantenimiento de este producto está incluido en la caja. Asegúrese de entregarlo al usuario. También se puede descargar desde www.pressalit.com.



- (EN) An operation signage (quick guide) for use by people with reading or cognitive disabilities, is enclosed in the box. It can also be downloaded at www.pressalit.com. User information is not available in braille.
- (DK) En visuel guide (hurtigguide) til personer med læsevanskeligheder eller kognitive vanskeligheder er vedlagt i emballagen. Den kan også downloades på www.pressalit.com. Brugeroplysningerne er ikke tilgængelige som blindskrift.
- (DE) Eine Kurzanleitung in Bildern für Personen mit Leseschwäche oder kognitiven Einschränkungen ist im Lieferumfang enthalten. Diese kann auch von der Website www.pressalit.com heruntergeladen werden. Die Benutzerinformationen sind nicht in Brailleschrift verfügbar.
- (FR) Une signalétique opérationnelle (guide rapide) à l'attention des personnes présentant des difficultés de lecture ou des déficiences cognitives est incluse dans l'emballage. Elle est également téléchargeable sur le site www.pressalit.com. Les informations utilisateur ne sont pas disponibles en braille.
- (NL) Voor mensen met lees- of begripsproblemen wordt een visuele handleiding in de doos meegeleverd. Deze kan ook op www.pressalitcare.com worden gedownload. Informatie voor gebruikers is niet in braille beschikbaar.
- (SV) En visuell snabbguide för personer med lässvårigheter eller kognitiv funktionsnedsättning medföljer i förpackningen. Den går även att ladda ned på www.pressalit.com. Användarinformationen finns inte tillgänglig på braille.
- (NO) En visuell hurtigveiledning for brukere med lesevasker eller kognitive vansker følger med i boksen. Den kan også lastes ned fra www.pressalit.com. Brukerinformasjon er ikke tilgjengelig i blindeskrift.
- (ES) En la caja se incluye una guía visual de funcionamiento para personas con dificultades lectoras o cognitivas. También se puede descargar desde www.pressalit.com. La información del usuario no está disponible en braille.

EN Mounting Instruction

Please read and carefully follow these instructions. Find the product number on the product label and ensure that these assembly instructions match your product.

WARNING: Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury or the product being damaged.



WARNING: If you suspect that any individual parts may be damaged, contact your Pressalit dealer or service provider. Do not remove, attempt to repair or install parts yourself, unless directed to do so by Pressalit or its agents.

WARNING: No modification of this equipment is allowed without express authorization from Pressalit.

WARNING: These instructions must be followed, and the product must be installed professionally by a qualified person; e.g. a licensed plumber, in order to avoid personal injury or property damage while using the product.

WARNING: Pressalit cannot be held liable for injury to persons or damage to property caused by faulty mounting.

Installation location

This product is designed for indoor use in a wet environment, such as a bathroom or washroom. It may only be used in an environment corresponding to the system's IP rating. Ensure that the installation location environment also complies with the following operating parameters of the product:

Environmental factor	Operating range
Temperature	5°C to 40°C
Relative humidity	20% to 90% @ 30°C (condensation free)
Atmospheric pressure	700 to 1060 hPa



WARNING: Medical electrical equipment needs special precautions regarding electromagnetic compatibility (EMC) and needs to be installed and put into service in accordance with the EMC information (provided in your product's operating instructions). It is unlikely that the user will encounter problems with the product because of inadequate electromagnetic compatibility.

However, electromagnetic immunity is always relative and standards anticipate environments of usage. Portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment. When the product is connected to the local mains power supply, we recommend the use of electromagnetic shielding and similar preventative measures to avoid conducted emissions.

When choosing an installation location, ensure that there will be adequate space for movement of—and access to—the product.

Assembly and installation

Mount the product against a wall in accordance with the illustrations in this assembly instruction. Connect the product components—hand control unit, motor, control box and power cable—to each other as shown. Ensure that the connectors are pressed in as far as possible into their corresponding sockets.

Connection to the mains supply

There is a range of potential configurations to connect the product to the mains power supply. See pages with ☺. The product is supplied with a plug attached, but this may need to be replaced with an IP-rated plug and socket combination appropriate to the location of the socket relative to moisture, or alternatively the product may be hardwired to a mains supply.

WARNING: Ensure that the circuit on the mains supply side is isolated from power while connecting the product to the mains supply.



WARNING: The product must be connected to the mains supply and a protective earth connection by a qualified electrician in accordance with IEC 60601-1 and IEC 60364-7, as well as any locally applicable standards.

WARNING: Ensure that the voltage of the local mains supply to be connected is compliant with that stated on the label on the product.



WARNING: To ensure protection by electrical separation, the product must be supplied by a mains supply circuit that does not supply power to any other equipment, unless it incorporates a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA. The circuit must be grounded using a protective earth connection and able to be isolated from mains supply by means of a switch installed in a wall or cabinet.

WARNING: The integrity of the external protective earthing system must be verified.

WARNING: The installer must verify that the protective earth terminal of the control box is connected to the external protective earthing system.

WARNING: Ensure that location of the mains isolation switch or coupling is easy to access and use.

WARNING: External cables need to be fixed in such a way that users cannot stumble and injure themselves.

Troubleshooting

If the product does not function, check that that all cables are securely connected, and that the electrical circuit is powered. A more detailed troubleshooting guide can be found in the product's operation and maintenance manual. Contact your Pressalit agent, if assistance is needed when installing the product.